



### Quick-Dry

**Kurztext:** Für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit.

**Erklärung:** Quick-Dry bezeichnet die Aufnahmeschicht direkt unter dem oberen Vlies, wo der Urin auf das Produkt trifft. Sie nimmt den Urin schnell von der Haut weg und leitet ihn in den Kern des Produkts weiter, wodurch ein Zurückfließen an die Oberfläche verhindert wird.


Die Faserstruktur öffnet sich bei einem plötzlichen Urinschwall und leitet die Flüssigkeit schnell in den Saugkern. Selbst unter Druck bleibt die Oberfläche trocken. Die Aufnahmezone kann mehrere Urinschübe bewältigen. Die Fasern selbst sind wenig saugfähig, sodass der Urin durch die Schicht hindurchfließt und nicht darin verbleibt – dies trägt zur Trockenheit der Oberfläche bei. Es gibt verschiedene Arten von Aufnahmezonen, deren Hauptzweck jedoch die schnelle Urinaufnahme ist.



### pH-Wert

**Kurztext:** Hautfreundlicher pH-Wert in der Aktivzone hilft die Haut zu schützen.

**Erklärung:** Gekräuselte Fasern helfen, den pH-Wert nahe dem natürlichen Wert der Haut im Intimbereich (pH-Wert ca. 4,5) zu halten. Ein niedriger pH-Wert hemmt das Wachstum unerwünschter Bakterien, die unangenehme Gerüche verursachen und die Haut schädigen können.

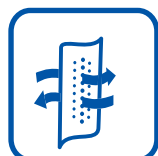

### 100% atmungsaktiv / atmungsaktive Materialien (je nach Produkt)

**Kurztext:** 100% atmungsaktiv für Rundum-Tragekomfort.  
oder:

**Kurztext:** Atmungsaktive Materialien für mehr Tragekomfort.

**Erklärung:** Atmungsaktive Materialien ermöglichen Luftzirkulation. Sie fördern die Hautgesundheit, indem sie Luft an die Haut lassen, ohne die Sicherheit gegen Auslaufen zu beeinträchtigen.



### Aktivzone

**Kurztext:** Für mehr Saugfähigkeit im Schrittbereich.

**Erklärung:** Die Aktivzone bezeichnet den mittleren Bereich des Produkts. Sie enthält einen höheren Anteil an Zellstoff und Superabsorber als die Randbereiche. Da meist in der Mitte des Produktes eingenässt wird, ist dort eine besonders hohe Aufnahmefähigkeit nötig.



### Saugkanaltechnologie

**Kurztext:** Für sofortige Trockenheit.

**Erklärung:** Slip Air Comfort, Flex und Adjustable verfügen über eine innovative Saugkanaltechnologie. Im unteren Saugkern befindet sich ein Kanal in Form eines Dreizacks, im oberen Saugkern ein gerader Kanal. Zusammen mit der Quick-Dry-Aufnahmezone sorgen sie für eine schnelle und gleichmäßige Verteilung des Urins im Produkt. Dies hilft, den Urin sicher einzuschließen, Auslaufen zu verhindern und die Haut trocken zu halten. Die Saugkanäle erleichtern außerdem das korrekte Anlegen des Produktes – besonders wichtig bei größeren Urinschüben.



### Geruchsbindung

**Kurztext:** Schützt vor unangenehmen Gerüchen.


**Erklärung:** Der Superabsorber im Saugkern bindet den Urin sicher und hält ihn zuverlässig von der Haut fern. Je besser der Urin im Inneren des Produkts eingeschlossen wird, desto geringer ist das Risiko von Auslaufen oder Kontakt mit Sauerstoff. Dadurch wird die Bildung von Ammoniak deutlich reduziert – und damit auch unangenehme Gerüche.



### Extraweiche Vliesoberfläche

**Kurztext:** Für ein sanftes Hautgefühl.

**Erklärung:** Das Oberflächenvlies fühlt sich seidig weich an und ist besonders hautfreundlich. Es lässt Flüssigkeit schnell durch, sodass der Urin zügig ins Innere des Produkts geleitet wird, wo er sicher aufgenommen wird.

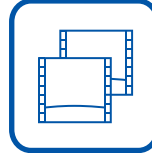

### Einzelverpackung

**Kurztext:** Für mehr Hygiene und Diskretion.

**Erklärung:** Die Produkte sind einzeln in einer Vliesumhüllung, die sie nach dem Öffnen der Packung vor Staub und Schmutz schützt und die für mehr Diskretion unterwegs sorgt.



### Nässeindikator

**Kurztext:** Zeigt an, wann ein Produktwechsel nötig ist.

**Erklärung:** Der Nässeindikator dient als Orientierungshilfe für das Wechseln des Produkts. Ist der Indikator zu mehr als der Hälfte verschwommen oder enthält das Produkt Stuhl, sollte es gewechselt werden. Andernfalls kann es erneut angelegt werden.