



**Systemanbieter für
ableitende Inkontinenz**

GESAMTKATALOG
www.ghc-medical.de

Einleitung

Mit unserem Sortiment an ableitenden Inkontinenzprodukten haben wir uns als GHC German Health Care GmbH auf einen Versorgungsbereich konzentriert, bei dem wir ein umfassendes Produktspektrum mit einer sehr hohen Expertise anbieten können. Und darauf dürfen sich unsere Kunden, insbesondere in den in vielerlei Hinsicht herausfordernden Zeiten, verlassen.

Sie finden bei uns unter anderem eine breite Auswahl an transurethralen und suprapubischen Ballonkathetern, unterschiedliche Katheter-Lagesets, Urinalkondomen, ein breites Sortiment von Urinaufgangssystemen und -beuteln sowie Beutelhaltesysteme und Zubehör. Neu im Sortiment sind die ersten Ausführungen der neuen ISK-Produktlinie der GHC, CARE CATH Liv & Leiv (Seite 39/40).

In unserem aktuellen Katalog finden Sie weitere neue Produkte, die wir für unsere Kunden aus HomeCare-Unternehmen, Sanitätshäusern und Kliniken ins Sortiment aufgenommen haben. So bieten wir mit der Urinalkondom-Serie CARE CON (Seite 41-43) eine sehr gute und zuverlässige Qualität zu einem attraktiven Preis. Unser neuer transurethraler Soft-Silikonballonkatheter (Seite 9) ist durch das weichere Schaftmaterial eine sehr gute Alternative zum bestehenden Ballonkatheter-Sortiment im HomeCare-Markt. Der neue, transurethrale Silikonkatheter mit Flötenspitze (Seite 14) eignet sich hervorragend, um insbesondere für das Patientenklintel mit problematischen Urinbefunden eine sehr gute Lösung zu bieten. Und auch unsere neuen PVC-Einmalkatheter ergänzen unser Produktsortiment (Seite 17/18). Neben der hohen Produktqualität sichern wir auch für die neuen Produkte eine hohe Liefertreue zu.

Mit dem Gesamtkatalog bieten wir Ihnen einen Überblick über das komplette Sortiment der GHC. Schauen Sie aber auch gerne auf www.ghc-medical.de, um tagesaktuelle Informationen und neue Produkte zu sehen.

Durch erweiterte Lagerkapazitäten, einer neuen Lagerverwaltungssoftware und einer hohen Serviceorientierung mit Unterstützungsangeboten haben wir uns für die Zukunft gut aufgestellt. Zum Beispiel haben wir ein Kundenportal geschaffen, in dem alle MDR-relevanten Dokumente für unser Sortiment jederzeit einsehbar und zum Download bereitstehen. Ein Service, der viel Zeit spart und Sicherheit schafft, dass alle notwendigen Unterlagen und Zertifikate aktuell sind und vorliegen.

Kommen Sie gerne auf uns zu und lassen Sie sich von den Vorteilen für Ihr Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit der GHC German Health Care GmbH überzeugen.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Herzliche Grüße von der GHC-Geschäftsführung,



Dirk Dohmann



Kay Kruse

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	Seite 3
Inhaltsverzeichnis	Seite 4,5
GHC Qualitätspolitik	Seite 6
Katheterleitfaden	Seite 7
CARE FLOW Transurethrale Katheter	
CARE FLOW Silikonkatheter, Nelatonspitze	Seite 8
CARE FLOW Soft Silikonkatheter, Nelatonspitze	Seite 9
CARE FLOW Silikonkatheter - integral, Nelatonspitze, mit Stopfen	Seite 10
BLUECATH Silikonkatheter - integral, Nelatonspitze, mit Stopfen	Seite 11
CARE FLOW Silikonelastomerkatheter, Nelatonspitze	Seite 12
CARE FLOW Silikonkatheter, Tiemannspitze	Seite 13
CARE FLOW Silikonkatheter, Flötenspitze	Seite 14
CARE FLOW Silikonelastomerkatheter, Couvelairespitze	Seite 15
CARE FLOW Silikonisierte Latexkatheter, Nelatonspitze	Seite 16
CARE FLOW PVC Frauen Einmalkatheter, Nelatonspitze	Seite 17
CARE FLOW PVC Männer Einmalkatheter, Nelaton- & Tiemannspitze	Seite 18
CARE FLOW Spül-Katheter	
CARE FLOW Silikon-Spülkatheter Nelatonspitze	Seite 19
CARE FLOW Silikon-Spülkatheter Dufourspitze	Seite 20
CARE FLOW Silikon-Spülkatheter Couvelairespitze	Seite 21
CARE FLOW Silikon-Spülkatheter Mercierspitze	Seite 22
CARE FLOW Suprapubische Katheter	
CARE FLOW UNIBAL Silikonkatheter - integral - zentral offen	Seite 23
CARE FLOW UNIBAL Silikonkatheter - integral - zentral offen, mit Stopfen	Seite 24
CARE FLOW Silikonkatheter - integral - zentral offen, mit Stopfen	Seite 25
CARE FLOW UNIBAL Silikonkatheter - integral - zentral offen, kurz	Seite 26
BLUECATH Silikonkatheter - integral - Dilatationspitze, mit Stopfen	Seite 27
BLUECATH Silikonkatheter - integral - zentral offen, mit Stopfen	Seite 28
CARE FLOW Silikonkatheter <i>blue</i> - integral - zentral offen, mit Stopfen	Seite 29
BLUECATH Silikonkatheter - integral - zentral offen, kurz, mit Stopfen	Seite 30
CARE FLOW UNIBAL Punktionsset	Seite 31
CARE FLOW UNIBAL Wechselset, inkl. PTFE-Führungsdraht	Seite 32
CARE FLOW Nephrostomie-Katheter	
CARE FLOW Silikonkatheter - integral - Dilatationsspitze	Seite 33
CARE SET Katheterlegesets und Zubehör	
Katheterlegeset Basis und Klinik	Seite 34
Katheterlegeset Comfort und Comfort Plus	Seite 35
Katheterlegeset Comfort Eco	Seite 36
Zubehör (Blockerspritze, Gleitgel, Katheterstopfen)	Seite 37

Inhaltsverzeichnis

CARE FLOW Katheterventile

CARE FLOW und CARE VENT Seite 38

CARE ISK Intermittierender Selbstkatheterismus

CARE CATH^{flex} IK-Einmalkatheter, hydrophil, 17 cm **neu** Seite 39

CARE CATH^{flex} IK-Einmalkatheter, hydrophil, 41 cm **neu** Seite 40

CARE MEK Urinkondome aus Silikon

CARE CON Urinkondom comfort / Typ I Seite 41

CARE CON Urinkondom special / Typ II Seite 42

CARE CON Urinkondom active / Typ III Seite 43

CARE FLOW Urindrainagesysteme und Zubehör

CARE FLOW UB 4000 TUR Geschlossenes TUR Spülbeutelsystem Seite 44

CARE FLOW UB 4000 Geschlossenes Urindrainagesystem Seite 45

CARE FLOW UB 2000 Geschlossenes Urindrainagesystem Seite 46

CARE FLOW UB 2000S Geschlossenes Urindrainagesystem, inkl. CARE BAG **neu** Seite 47

CARE FLOW UB 2000A Bettbeutel Seite 48

CARE FLOW UB 2000E Einmal-Bettbeutel, inkl. UB 2000US, PVC Beutelhalterung Seite 49

CARE FLOW UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo Einmal-Bettbeutel ohne Ablass Seite 50

CARE FLOW UB 1000 Geschlossenes Urindrainagesystem Tag & Nacht Seite 51

CARE FLOW UB 750/750US 1-Kammer Beinbeutelsystem Seite 52

CARE FLOW UB 750F/750UF 1-Kammer Beinbeutelsystem mit Kippventil Seite 53

CARE FLOW UB 500/500US 3-Kammer Beinbeutelsystem Seite 54

CARE FIX Beinbeutelfixiersysteme

CARE FIX Kletthalteband Universal Seite 55

CARE FIX Kletthaltebänder Premium-Set, mit und ohne Knöpfe Seite 56

CARE FIX Fixierstrümpfe mit integrierter Beinbeuteltasche, mit und ohne Klettverschluss Seite 57

CARE FIX Stulpen für Oberschenkel Seite 58

CARE FIX Stulpen für Unterschenkel Seite 59

CARE FIX Einbeinhosen Premium Seite 60

CARE DRESS Verbandstoffe

Suprapubisches Verbandset Seite 61

PEG Verbandset Seite 62

Kontakt Seite 63

Die German Health Care GmbH steht für innovative Lösungen bei der medizinischen Versorgung von Betroffenen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Als Importeur und Vertreiber von Produkten speziell für das Blasenmanagement bieten wir Kliniken und HomeCare-Unternehmen ein breites Portfolio an individuellen Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität ihrer Kunden – mit der Sicherheit einer hohen Produktqualität und zuverlässigen Anwendung.

Unsere umfangreiche Produktpalette haben wir in strategischer Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern aufgebaut. Durch den intensiven Austausch unterliegen unsere Produkte nicht nur einer stetigen Verbesserung, auch neue Medizinprodukte werden ins Sortiment aufgenommen. Daher schätzen nicht nur marktführende HomeCare-Versorger, Kliniken und Einkaufsgemeinschaften aus dem Sanitätshausfachhandel seit Jahren die Qualität unseres Produktangebotes und Dienstleistungen.

Die Produktion erfolgt nach klaren Vorgaben und Spezifikationen an unterschiedlichen Standorten unserer Hersteller, weltweit. In regelmäßig stattfindenden Audits wird die Qualität der Fertigungsprozesse in den einzelnen Produktionsstätten überprüft. Nach der Produktion finden jeweils umfassende Qualitätskontrollen durch die Hersteller statt, bevor die Ware versandt wird, sowie erneut, wenn die Ware im Hochregallager in Wees eintrifft. Bevor die GHC-Produkte an unsere Kunden versandt werden, sind diese umfassend geprüft und getestet. Ausschließlich einwandfrei produzierte Produkte werden für den Einsatz freigegeben. Auf diese strenge Qualitätspolitik dürfen sich unsere Kunden verlassen.



Die Qualitätspolitik wird auch in unserem Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 13485 regelmäßig überwacht und durch die DQS auditiert.

Aber nicht nur auf die Qualität unserer Produkte dürfen Sie sich gerne verlassen. Auch unsere Mitarbeitenden bilden die Basis unseres Erfolges. Unsere qualifizierten Medizinprodukteberater*innen im Innen- und Außendienst beraten Sie gerne zu allen Fragen rund um das GHC-Sortiment und kümmern sich um die schnellstmögliche Bearbeitung Ihrer Anliegen. Durch kontinuierliche Inhouse-Workshops und Weiterbildungen sowie durch IT-gestützte Prozesse wird diese Fachkompetenz garantiert, so dass Ihre Anfragen, Ihre Bestellungen und Ihre Ware schnellstmöglich bearbeitet und zum Versand gebracht werden. Damit dürfen Sie rechnen.

Sichern Sie sich durch die Zusammenarbeit mit der GHC German Health Care GmbH die Qualität in der Versorgung durch den Systemanbieter für die ableitende Inkontinenzversorgung.

KATHETER ABC

Katheterleitfaden



2-Wege-Ansatz



3-Wege-Ansatz



Einmalkatheter

Größe: 1 Charrière (CH = 1 French 0,33mm)

Wir führen Katheter aus verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Spezifikationen, um allen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Darunter sind Katheter aus Vollsilikon und Silikonelastomer zur Langzeitdrainage, aber auch Latexkatheter zur Kurzzeitdrainage.

Klassische Kathetermaterialien



Vollsilikon



Silikonelastomer –
Latexkern mit Silikon-
ummantelung



Latex

Klassische Katheterspitzen für die transurethrale und suprapubische Harnableitung



Nelatonspitze



Tiemannspitze



zentral offen



Dilatationsspitze



Couvelairespitze



Mercierspitze



Dufourspitze



Flötenspitze

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW

Transurethrale 100% Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ In den CH-Größen 06 - 10 sind die Katheter mit einer stabilisierenden Führungsschiene ausgestattet.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze

8

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 06	03 ml	27 cm	01/01/11/06/03/GHC	01150196
CH 08	05 ml	27 cm	01/01/11/08/05/GHC	01150204
CH 10	05 ml	27 cm	01/01/11/10/05/GHC	01150210
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/11/12/10/GHC	01150368
CH 14	10 ml	40 cm	01/01/11/14/10/GHC	01150374
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/11/16/30/GHC	01150380
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/11/18/30/GHC	01150397
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/11/20/30/GHC	01150428
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/11/22/30/GHC	01150434
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/11/24/30/GHC	01150440
CH 26	30 ml	40 cm	01/01/11/26/30/GHC	01150457

HMN: 15.25.15.6136



Ballonvolumen: 03-30 ml

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW

Transurethrale **Soft** 100% Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ In den CH.-Größen von 06 - 10 sind die Katheter mit einer stabilisierenden Führungsschiene ausgestattet.
- ✓ Sehr hoher Tragekomfort durch Soft-Silikonmaterial des Katheterschaftes.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ Die Katheter eignen sich für die Langzeitdrainage.



Nelatonspitze

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 06	03 ml	31 cm	01/01/01/06/03/GHC	17883185
CH 08	05 ml	31 cm	01/01/01/08/05/GHC	17883216
CH 10	05 ml	31 cm	01/01/01/10/05/GHC	17883222
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/01/12/10/GHC	17883239
CH 14	10 ml	40 cm	01/01/01/14/10/GHC	17883251
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/01/16/30/GHC	17883268
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/01/18/30/GHC	17883274
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/01/20/30/GHC	17883280
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/01/22/30/GHC	17883297
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/01/24/30/GHC	17883305
CH 26	30 ml	40 cm	01/01/01/26/30/GHC	17883311

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril

HMN: 15.25.15.6044



Ballonvolumen: 03-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

Produktspezifikationen:

- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den in den Schaft eingearbeiteten *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze,
integral Ballon

HMN: 15.25.15.6050

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	41 cm	01/01/25/12/05/GHC	18064437
CH 14	05 ml	41 cm	01/01/25/14/05/GHC	18064443
CH 16	10 ml	41 cm	01/01/25/16/10/GHC	18064466
CH 18	10 ml	41 cm	01/01/25/18/10/GHC	18064472
CH 20	10 ml	41 cm	01/01/25/20/10/GHC	18064489
CH 22	10 ml	41 cm	01/01/25/22/10/GHC	18064495

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

BLUECATH

Transurethrale *integral* 100% Silikonkatheter

2-Wege integral Ballonkatheter mit Nelatonspitze und Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den in den Schaft eingearbeiteten *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze,
integral Ballon

11

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	41 cm	01/01/26/12/05/GHC	18064503
CH 14	05 ml	41 cm	01/01/26/14/05/GHC	18064526
CH 16	10 ml	41 cm	01/01/26/16/10/GHC	18064532
CH 18	10 ml	41 cm	01/01/26/18/10/GHC	18064549
CH 20	10 ml	41 cm	01/01/26/20/10/GHC	18064555
CH 22	10 ml	41 cm	01/01/26/22/10/GHC	18064561

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril

HMN: 15.25.15.6051



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW

Transurethrale Silikonelastomerkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Hohe Elastizität und Tragekomfort durch die Silikonummantelung des Latexkerns an der inneren und äußeren Katheterwand.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und eine geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze



Silikonelastomer – Latexkern mit Silikonummantelung

12

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/10/12/10/GHC	01149371
CH 14	30 ml	40 cm	01/01/10/14/30/GHC	01149388
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/10/16/30/GHC	01149394
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/10/18/30/GHC	01149939
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/10/20/30/GHC	01149945
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/10/22/30/GHC	01149951
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/10/24/30/GHC	01149968
CH 26	30 ml	40 cm	01/01/10/26/30/GHC	01150173

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

HMN: 15.25.15.6144



Ballonvolumen: 10-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.216.197) am 12.08.2026 um 16:45 Uhr · sanaservices.ch

CARE FLOW

Transurethrale 100% Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Tiemannspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Atraumatische dilatierende Kugelspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Tiemannspitze

13

HMN: 15.25.15.6049

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/01/08/12/05/GHC	17933670
CH 14	20 ml	40 cm	01/01/08/14/20/GHC	17933687
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/08/16/30/GHC	17933693
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/08/18/30/GHC	17933701
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/08/20/30/GHC	17933718
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/08/22/30/GHC	17933724

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 5-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW

Transurethrale 100% Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Flötenspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Sehr gute Drainageleistung durch zentral offene Spitze, seitliches Drainageauge und großes Innenlumen, auch bei kritischen Urinbefunden.
- ✓ Atraumatische Flötenspitze ermöglicht gutes Vorschieben des Katheters.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustrationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich für die Langzeitdrainage.



Zentral offene Flötenspitze

14

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/07/12/10/GHC	17933747
CH 14	10 ml	40 cm	01/01/07/14/10/GHC	17933753
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/07/16/30/GHC	17933776
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/07/18/30/GHC	17933782
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/07/20/30/GHC	17933799
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/07/22/30/GHC	17933807

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

HMN: 15.25.15.6048



Ballonvolumen: 10-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de



CARE FLOW

Transurethrale Silikonelastomerkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Couvelairespitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Hohe Elastizität durch die Silikonummantelung an der inneren und äußeren Katheterwand.
- ✓ Optimale Drainageleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offene Couvelairespitze.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 60 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.

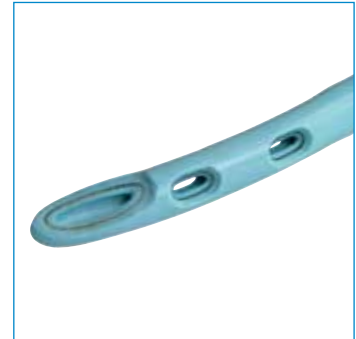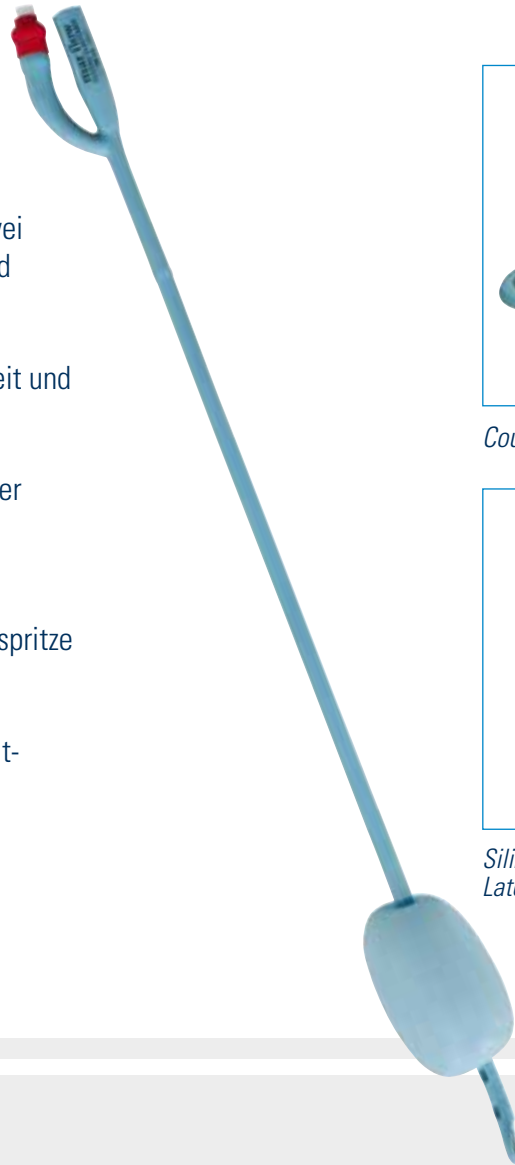

Couvelairespitze



Silikonelastomer – Latexkern mit Silikonummantelung

15

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	60 ml	40 cm	01/01/15/18/60/GHC	06434975
CH 20	60 ml	40 cm	01/01/15/20/60/GHC	06434952
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/15/22/60/GHC	06434969
CH 24	60 ml	40 cm	01/01/15/24/60/GHC	09710080

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen bis zu 60 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de


CARE FLOW

Transurethrale silikonisierte Latexkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Gefertigt aus hochwertigem silikonisiertem medizinischen Latex.
- ✓ Die Katheter bestechen durch ihren angenehmen Tragekomfort.
- ✓ Die sichere Fixierung der Katheter in der Blase wird durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml erzielt.
- ✓ Verwenden Sie hierfür unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Die Katheter eignen sich nur zur Kurzzeit-drainage von bis zu 5 Tagen.
- ✓ Diese Produkte enthalten Naturlatex, welches allergische Reaktionen auslösen kann.

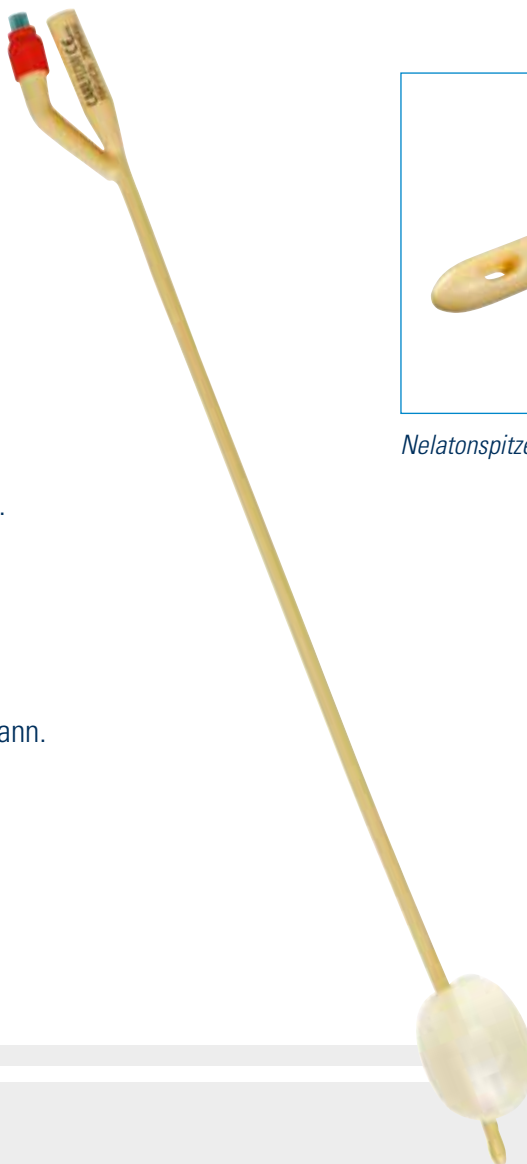

Nelatonspitze

16

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/13/12/10/GHC	01150701
CH 14	10 ml	40 cm	01/01/13/14/10/GHC	01150859
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/13/16/30/GHC	01150865
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/13/18/30/GHC	01150871
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/13/20/30/GHC	01150888
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/13/22/30/GHC	01150919

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

HMN: 15.25.15.5076



Ballonvolumen: 10-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

Produktspezifikationen:

- ✓ Einmalkatheter mit zwei seitlich versetzten Drainageaugen.
- ✓ Abgerundete, geschlossene Spitze.
- ✓ Weiches PVC-Material.
- ✓ DEHP-frei.
- ✓ Die Katheter eignen sich ausschließlich zum Einmalkatheterismus.



Nelatonspitze

HMN: 15.25.14.4001



Seitlich versetzte Augen

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 08	20 cm	01/01/35/08/00/GHC	18320975
CH 10	20 cm	01/01/35/10/00/GHC	18320981
CH 12	20 cm	01/01/35/12/00/GHC	18320998
CH 14	20 cm	01/01/35/14/00/GHC	18321006
CH 16	20 cm	01/01/35/16/00/GHC	18321035

Verpackungseinheit: 100 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Einmalkatheter mit zwei seitlich versetzten Drainageaugen.
- ✓ Abgerundete, geschlossene Nelatonspitze oder Tiemannspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Weiches PVC-Material.
- ✓ DEHP-frei.
- ✓ Die Katheter eignen sich ausschließlich zum Einmalkatheterismus.



Nelatonspitze



Tiemannspitze

Nelatonspitze

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	40 cm	01/01/36/10/00/GHC	18321058
CH 12	40 cm	01/01/36/12/00/GHC	18321064
CH 14	40 cm	01/01/36/14/00/GHC	18321070
CH 16	40 cm	01/01/36/16/00/GHC	18321087
CH 18	40 cm	01/01/36/18/00/GHC	18321093

HMN: 15.25.14.4005

Tiemannspitze

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	40 cm	01/01/37/12/00/GHC	18321124
CH 14	40 cm	01/01/37/14/00/GHC	18321130
CH 16	40 cm	01/01/37/16/00/GHC	18321147
CH 18	40 cm	01/01/37/18/00/GHC	18321153
CH 20	40 cm	01/01/37/20/00/GHC	18321176

HMN: 15.25.14.4025

Verpackungseinheit: 100 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen


CARE FLOW

Transurethrale 100% Silikonspülkatheter

3-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Atraumatische Nelatonspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Optimale Drainage- und Spülleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die sichere Fixierung der Katheter in der Blase wird durch die hohe Ballonkapazität erzielt.
- ✓ Verwenden Sie hierfür unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.

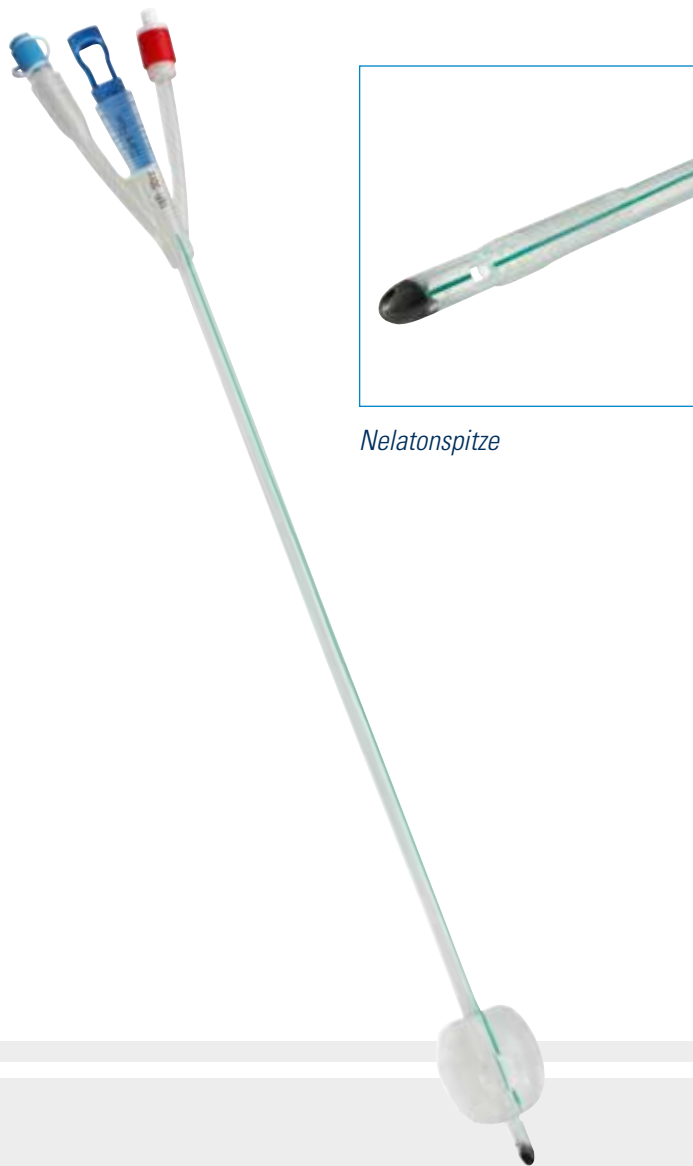

Nelatonspitze

19

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/22/18/30/GHC	15618237
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/22/20/30/GHC	15618243
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/22/22/30/GHC	15618266
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/22/24/30/GHC	15618295

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW

Transurethrale 100% Silikonspülkatheter

3-Wege Ballonkatheter mit Dufourspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Optimale Drainage- und Spülleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offener Spitze.
- ✓ Atraumatische, knickstabile Dufourspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch großes Ballonvolumen.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenologische Darstellung der Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Dufourspitze

20

HMN: 15.25.15.3035

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	40 ml	40 cm	01/01/16/18/40/GHC	01151178
CH 20	50 ml	40 cm	01/01/16/20/50/GHC	01151184
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/16/22/60/GHC	01151190
CH 24	70 ml	40 cm	01/01/16/24/70/GHC	01151379

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 40-70 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW

Transurethrale 100% Silikonspülkatheter

3-Wege Ballonkatheter mit Couvelairespitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Optimale Drainage- und Spülleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offener Spitze.
- ✓ Atraumatische, knickstabile Couvelairespitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch großes Ballonvolumen.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenologische Darstellung der Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Couvelairespitze

21

HMN: 15.25.15.3036



Ballonvolumen: 40-70 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	40 ml	40 cm	01/01/17/18/40/GHC	01151385
CH 20	50 ml	40 cm	01/01/17/20/50/GHC	01151391
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/17/22/60/GHC	01151416
CH 24	70 ml	40 cm	01/01/17/24/70/GHC	01151439

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW

Transurethrale 100% Silikonspülkatheter

3-Wege Ballonkatheter mit Mercierspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Optimale Drainage- und Spülleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen.
- ✓ Atraumatische, knickstabile Mercierspitze zur komplikationslosen Passage der Prostata-loge.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch großes Ballonvolumen.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenologische Darstellung der Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Mercierspitze

HMN: 15.25.15.3037



Ballonvolumen: 40-70 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	40 ml	40 cm	01/01/18/18/40/GHC	01151511
CH 20	50 ml	40 cm	01/01/18/20/50/GHC	01151528
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/18/22/60/GHC	01151534
CH 24	70 ml	40 cm	01/01/18/24/70/GHC	01151540

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UNIBAL

Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem integral Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Die Katheter bestechen durch ihren angenehmen Tragekomfort.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.



*Zentral offene Spitze,
integral Ballon*

23

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/12/10/03/GHC	01152568
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/12/12/05/GHC	01152574
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/12/14/05/GHC	01152605
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/12/16/10/GHC	01152611
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/12/18/10/GHC	01152628
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/12/20/10/GHC	01152700
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/12/22/10/GHC	01152717

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 03-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW UNIBAL

Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem integral Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Die Katheter bestechen durch ihren angenehmen Tragekomfort.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT - Kompatibilität.



*Zentral offene Spitze,
integral Ballon*

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/14/10/03/GHC	10198115
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/14/12/05/GHC	10198121
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/14/14/05/GHC	10198138
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/14/16/10/GHC	10198144
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/14/18/10/GHC	10198150
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/14/20/10/GHC	10198167
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/14/22/10/GHC	10198173

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 03-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW

Suprapubische 100% Silikonkatheter *integral*

2-Wege Ballonkatheter mit Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet, so dass der Schaft keinen Kalibersprung hat. Schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen des Katheters werden dadurch verhindert.
- ✓ Die Katheter zeichnen sich durch guten Tragekomfort aus.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustrationsneigung durch 100% Silikon.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT - Kompatibilität.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

25

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	41 cm	01/02/09/12/05/GHC	16840937
CH 14	05 ml	41 cm	01/02/09/14/05/GHC	16840943
CH 16	10 ml	41 cm	01/02/09/16/10/GHC	16840972
CH 18	10 ml	41 cm	01/02/09/18/10/GHC	16840989
CH 20	10 ml	41 cm	01/02/09/20/10/GHC	16840995
CH 22	10 ml	41 cm	01/02/09/22/10/GHC	16841003

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW UNIBAL

Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter, kurz

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	33 cm	01/02/13/10/03/GHC	01152746
CH 12	05 ml	33 cm	01/02/13/12/05/GHC	01152812
CH 14	05 ml	33 cm	01/02/13/14/05/GHC	01152829
CH 16	10 ml	33 cm	01/02/13/16/10/GHC	01152841
CH 18	10 ml	33 cm	01/02/13/18/10/GHC	01152918
CH 20	10 ml	33 cm	01/02/13/20/10/GHC	01152924
CH 22	10 ml	33 cm	01/02/13/22/10/GHC	01152947

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril




Ballonvolumen: 03-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Dilatationsspitze mit zentraler Bohrung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.

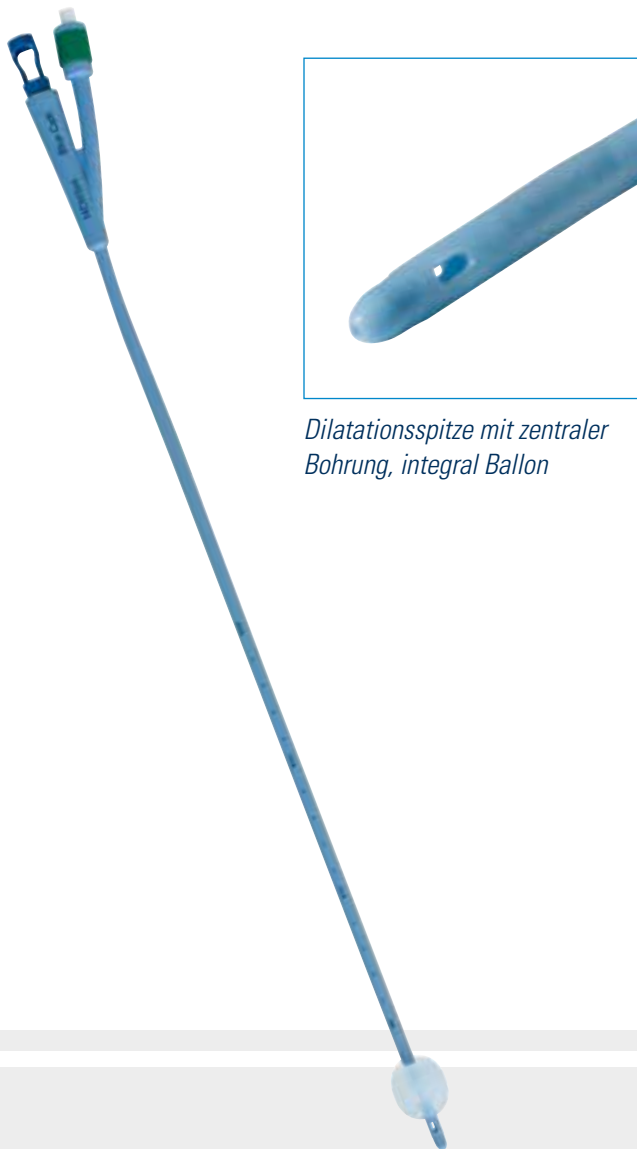

Dilatationsspitze mit zentraler Bohrung, integral Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/21/12/05/GHC	11850948
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/21/14/05/GHC	11850954
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/21/16/10/GHC	11850983
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/21/18/10/GHC	11851008
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/21/20/10/GHC	11851014
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/21/22/10/GHC	11851020

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ MRT - Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/22/12/05/GHC	11851037
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/22/14/05/GHC	11851043
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/22/16/10/GHC	11851072
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/22/18/10/GHC	11851089
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/22/20/10/GHC	11851095
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/22/22/10/GHC	11851126
CH 24	10 ml	40 cm	01/02/22/24/10/GHC	11851132

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet, so dass der Schaft keinen Kalibersprung hat. Schmerzhafte Stauchungen an der Faszia beim Einlegen des Katheters werden dadurch verhindert.
- ✓ Die Katheter zeichnen sich durch guten Tragekomfort aus.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustrationsneigung durch 100% Silikon.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Katheterspitze mit Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT - Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.



*Zentral offene Spitze,
integral Ballon*

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	41 cm	01/02/11/12/05/GHC	16841026
CH 14	05 ml	41 cm	01/02/11/14/05/GHC	16841032
CH 16	10 ml	41 cm	01/02/11/16/10/GHC	16841049
CH 18	10 ml	41 cm	01/02/11/18/10/GHC	16841061
CH 20	10 ml	41 cm	01/02/11/20/10/GHC	16841078
CH 22	10 ml	41 cm	01/02/11/22/10/GHC	16841084

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril




Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.

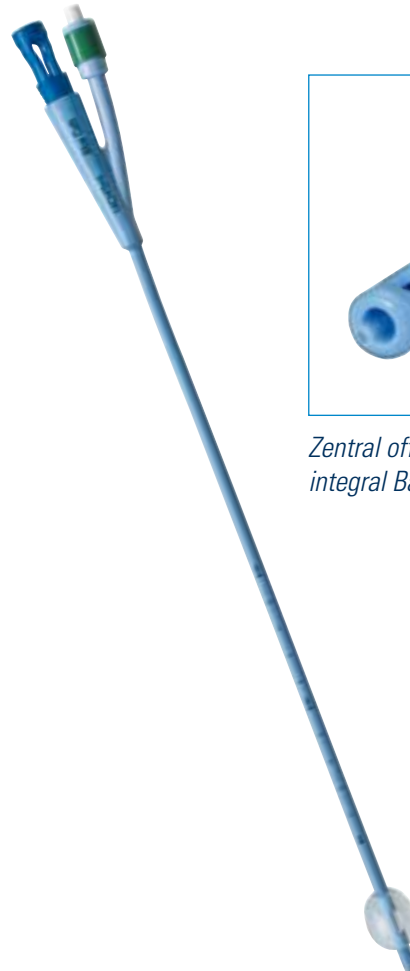

Zentral offene Spitze,
integral Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	33 cm	01/02/23/12/05/GHC	11851149
CH 14	05 ml	33 cm	01/02/23/14/05/GHC	11851155
CH 16	10 ml	33 cm	01/02/23/16/10/GHC	11851161
CH 18	10 ml	33 cm	01/02/23/18/10/GHC	11851178
CH 20	10 ml	33 cm	01/02/23/20/10/GHC	11851184
CH 22	10 ml	33 cm	01/02/23/22/10/GHC	11851190

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UNIBAL

Suprapubisches Punktionsset

2-Wege *integral* Ballonkatheter

Produktspezifikationen:

Bestandteile des Punktionsset

- 100% Silikon *integral* Ballonkatheter
- Spaltkanüle mit Spezialschliff
- Stichskalpell mit kleinem Griff

- ✓ *Integral* Ballonkatheter mit übergangslos in den Katheterschaft eingearbeitetem Ballon.
- ✓ Optimale Nutzung des Innendurchmessers der Kanüle durch *integral* Ballonkatheter:
Charrière 10 und 12 mit Spaltkanüle
CH 13,8 (4,6 mm), Stichlänge 120 mm.
Charrière 14 mit Spaltkanüle
CH 16,8 (5,6 mm), Stichlänge 120 mm.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

31

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/15/10/03/GHC	01153059
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/15/12/05/GHC	01153065
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/15/14/05/GHC	01153088

Verpackungseinheit: 5 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 03-05 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW UNIBAL

Suprapubisches Wechselset, inkl. PTFE-Führungsdraht

2-Wege *integral* Ballonkatheter mit Wechseldraht

Produktspezifikationen:

Bestandteile des Wechselset

- 100% Silikon *integral* Ballonkatheter
- Wechseldraht teflonbeschichtet

- ✓ *Integral* Ballonkatheter mit übergangslos in den Katheterschaft eingearbeitetem Ballon.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Führungstabiler teflonbeschichteter Wechseldraht.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Wechseldraht teflonbeschichtet, 80 cm Länge, 3 cm gerade flexible Spitze, Drahtdurchmesser 0,035".



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

32

Führungsdraht

Draht	Spitze	Länge	Artikelnummer	PZN
besch.	3 cm flex.	80 cm	01/02/18/80/35/GHC	14166431

Verpackungseinheit: 1 Stück

Verpackung: steril

Wechselset, inkl. Führungsdraht

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/16/10/03/GHC	01153154
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/16/12/05/GHC	01153160
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/16/14/05/GHC	01153183

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 03-05 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

NEPHROSTOMIE

Nephrostomie *integral* 100% Silikonkatheter 2-Wege Ballonkatheter

Produktspezifikationen:

- ✓ Katheter hat hervorragende Gewebeverträglichkeit und eine geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.
- ✓ Dilatierende Nelatonspitze mit zentraler Bohrung.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch jeweils zwei Katheteraugen vor und hinter dem Ballon.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle
- ✓ 100% Silikon



Dilatierende Nelatonspitze mit zentraler Bohrung, Integral Ballon

33

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	1,5 ml	40 cm	01/03/10/10/01/GHC	13851171
CH 12	2,0 ml	40 cm	01/03/10/12/02/GHC	13851188
CH 14	3,0 ml	40 cm	01/03/10/14/03/GHC	13851202
CH 16	5,0 ml	40 cm	01/03/10/16/05/GHC	13851219
CH 18	5,0 ml	40 cm	01/03/10/18/05/GHC	13851225

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 1,5 - 5,0 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE SET

Katheterlegeset Typ Basis + Klinik

Produktspezifikationen:

- ✓ Das Katheterlege-Set ist in eine äußere und in eine innere Verpackung unterteilt.
- ✓ Bestandteil der äußeren Verpackung des Basis-Set ist: Eine sterile 10 ml Spritze zum entblocken des liegenden Katheters.
- ✓ Die Bestandteile der inneren sterilisierten Verpackung benötigt man zur Neuanlage eines transurethralen Katheters.



Artikel	Artikelnummer	PZN
Basis	01/01/99/BS/GHC	01972188
Klinik	01/01/99/BSK/GHC	08845872

34

Bestandteile der Katheterlege-Sets sind:

1 Schale



6 Tupfer



1 Pinzette



2 Unterlagen



Zusätzlich im Basis-Set enthalten:



10 ml Spritze

1 Blockerspritze mit 10% Glycerin



3 NITRIL Handschuhe



1 Schlitztuch



Verpackungseinheit: 20 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE SET

Katheterlegeset Comfort und Comfort Plus

Produktspezifikationen:

- ✓ Das Katheterlege-Set ist in eine äußere und in eine innere Verpackung unterteilt.
- ✓ Die Bestandteile der äußeren Verpackung sind: Eine sterile 10 ml Spritze zum Entblocken des liegenden Katheters. Schleimhautdesinfektion Octenisept 15 ml
- ✓ Zusätzlich beim Comfort Plus in der äußeren Verpackung: Endosgel 6 ml.
- ✓ Die Bestandteile der inneren sterilisierten Verpackung benötigt man zur Neuanlage eines transurethralen Katheters.



Artikel	Artikelnummer	PZN
Comfort	01/01/99/KL/CO/GHC	14209815
Comfort Plus	01/01/99/KL/CP/GHC	14209821

Bestandteile der Katheterlege-Sets sind:

1 Schale



6 Tupfer



1 Pinzette



10 ml Spritze



Schleimhaut-
desinfektion



Octenisept, 15 ml

Zusätzlich im
Comfort Plus:



Endosgel, 6 ml

1 Blockerspritze
mit 10% Glycerin



3 NITRIL
Handschuhe



1 Schlitztuch



2 Unterlagen



Verpackungseinheit: 35 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care since 1971 Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.216.197) am 12.08.2026 um 16:45 Uhr · sanaservices.ch

CARE SET

Katheterlegeset Comfort Eco

Produktspezifikationen:

- ✓ Das Comfort Eco-Set ist in eine äußere und in eine innere Verpackung unterteilt.
- ✓ Bestandteil der äußeren Verpackung ist: Eine sterile 10 ml Spritze zum Entblocken des liegenden Katheters.
Schleimhautdesinfektion Octenisept 15 ml
Gleitmittel 6 ml.
- ✓ Die Bestandteile der inneren sterilisierten Verpackung benötigt man zur Neuanlage eines transurethralen Katheters.



Artikel	Artikelnummer	PZN
Comfort Eco	01/01/99/KL/CE/GHC	16134211

36

Bestandteile der Katheterlege-Sets sind:


1 Schale



6 Tupfer



1 Pinzette

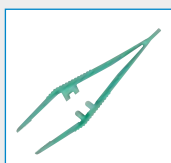

10 ml Spritze



Schleimhaut-
desinfektion



Octenisept, 15 ml

1 Blockerspritze
mit 10% Glycerin



3 NITRIL
Handschuhe



1 Schlitztuch



2 Unterlagen



Gleitgel



LUBRICARE, 06 ml

Verpackungseinheit: 35 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German
Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

Zubehör rund um den Katheterwechsel

Neben dem Sortiment an Kathetern, Drainage- und Haltesystemen liefern wir Ihnen auch das erforderliche Zubehör, um die Versorgung mit ableitenden Inkontinenzhilfsmitteln und den Katheterwechsel optimal durchführen zu können, und dadurch eine hohe Versorgungsqualität zu erreichen.

Hervorheben möchten wir:

- Die **Blockerspritze mit 10% Glycerinlösung, 10 ml** (Art.-Nr. 01/01/99/KB/10/GHC), sichert das Ballonvolumen über die Tragedauer des Ballonkatheters, ohne dass das Füllmedium diffundiert. Der Ballonkatheter bleibt somit gut fixiert und das Risiko von Dislokationen kann nahezu ausgeschlossen werden.
- Das **Gleitgel LUBRICARE, 6 ml** (Art.-Nr. 01/01/99/GG/06/001), haftet sehr gut an der Schleimhaut an und hat ausgezeichnete Gleiteigenschaften, so dass der Katheterwechsel reibungslos durchgeführt werden kann.

Bei den dargestellten Produkten handelt es sich um einen Programmauszug; weitere Artikel gerne auf Nachfrage.



Blockerspritze mit
10% Glycerinlösung, 10 ml



Gleitgel LUBRICARE, 06 ml



Katheterstopfen



Octenisept, 15 ml

	Produkt	Artikelnummer	PZN	HMN	VE
1.	Blockerspritze	01/01/99/KB/10/GHC	06718980	15.99.99.0006	1VE = 200 Stück
2.	LUBRICARE Gleitgel	01/01/99/GG/06/001	13360220	15.99.99.1002	1VE = 100 Stück
	LUBRICARE Gleitgel	01/01/99/GG/06/25	16938435	15.99.99.1002	1VE = 4 x 25 Stk.
	Endosgel Gleitgel	01/01/99/HG/EG/GHC	02437623	15.99.99.1002	1VE = 250 Stück
3.	Katheterstopfen	01/01/99/ZB/ST/GHC	14354919	15.25.16.0013	1VE = 20 Stück
4.	Octenisept	01/01/99/OCT/15/GHC	04804008		1VE = 100 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW und CARE VENT Katheterventile zur individuellen selbstständigen Harnblasenentleerung

CARE FLOW Katheterventil

- ✓ Optimale Lösungen für mobile und selbstständige Anwender mit einem transurethralen oder suprapubischen Katheter.
- ✓ Durch ein Katheterventil wird die Blasenmuskulatur weiter ständig trainiert, somit bleibt die Blasenfunktion vollständig erhalten. Die Blasenentleerung kann im natürlichen Rhythmus des Anwenders stattfinden. Dies erhöht nachhaltig die Lebensqualität.
- ✓ Für eine ungestörte Nachtruhe ist es möglich, mittels eines fest angebrachten Silikonschlauchverbinders das Ventil an ein Beutelsystem anzuschließen.
- ✓ Durch das Umlegen des Kippventils um 180° ist das CARE FLOW Katheterventil vollständig geöffnet und zusätzlich in einer sicheren Position fixiert. Dies verhindert ein versehentliches schließen.



HMN: 15.25.16.0031



Pfeile weisen auf offene / geschlossene Position hin



Katheterventil geschlossen



Katheterventil bei 180° Stellung offen

Gewicht	Artikelnummer	PZN
3g	03/02/10/00/GHC	12378382

38

Verpackungseinheit: 5 Stück
Verpackung: steril

CARE VENT Katheterventil

- ✓ Die spezielle Konstruktion des CARE VENT verhindert ein Nachtropfen von Urin, nach dem selbstständigen Schließen des Ventils. So wird eine hygienische Handhabung gewährleistet.
- ✓ Die farbliche Kennung der Dreh- und Schieberegler macht die Einhandbedienung denkbar einfach.

Gewicht	Artikelnummer	PZN
6g	03/02/10/01/GHC	01914676

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: einfach steril



Abbildungen können vom Original abweichen

CARE CATH_{Liv}

IK-Einmalkatheter, hydrophil, 17 cm

Sofort gebrauchsfertig, Nelaton

Produktspezifikationen:

- ✓ Sehr gute Gleitfähigkeit durch hydrophile Beschichtung.
- ✓ Sofort einsatzfähig durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Atraumatische Anwendung durch abgerundete Drainageaugen.
- ✓ Optimale Länge von 17 cm gewährleistet vollständige Blasenentleerung.
- ✓ Berührungsfreie Anwendung und gute Führbarkeit durch richtige Steifigkeit des Katheters.
- ✓ Gute Griffigkeit des Griffstücks ermöglicht gute Handhabung, auch bei eingeschränkter Fingerfertigkeit.
- ✓ Konnektion von Urinauffangbeutel und/oder Instillationslösung über Konus des Griffstück leicht möglich.



Atraumatische, abgerundete Drainageaugen



39

CARE CATH_{Liv}

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	17 cm	LIV-H1017	18890885
CH 12	17 cm	LIV-H1217	18890916
CH 14	17 cm	LIV-H1417	18890922

Verpackungseinheit: 30 Stück

Verpackung: steril

HMN: 15.25.14.7011



Griffigkeit des Griffstücks

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE CATH_{Leir}

IK-Einmalkatheter, hydrophil, 41 cm

Sofort gebrauchsfertig, Nelaton

Produktspezifikationen:

- ✓ Sehr gute Gleitfähigkeit durch hydrophile Beschichtung.
- ✓ Sofort einsatzfähig durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Atraumatische Anwendung durch abgerundete Drainageaugen.
- ✓ Berührungsfreie Anwendung und gute Führbarkeit des Katheters durch leicht zu lösendes Griffstück.
- ✓ Gute Griffigkeit des Griffstücks ermöglicht gute Handhabung, auch bei eingeschränkter Fingerfertigkeit.
- ✓ Konnektion von Urinauffangbeutel und/oder Instillationslösung über Konus des Griffstück leicht möglich.



Atraumatische, abgerundete Drainageaugen



40

CARE CATH_{Leir}

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	41 cm	LEIV-H1241	18890833
CH 14	41 cm	LEIV-H1441	18890856
CH 16	41 cm	LEIV-H1641	18890862

Verpackungseinheit: 30 Stück
Verpackung: steril

HMN: 15.25.14.7012



Griffigkeit des Griffstücks

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE CON comfort | Typ I

Urinalkondome aus 100% Silikon

selbstklebend

Produktspezifikationen:

- ✓ Die CARE CON comfort überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einen sicheren Halt.
- ✓ Die Materialdicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt, und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
- ✓ Der stabile Schlauchansatz verhindert ein Abknicken des Urinalkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
- ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
- ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.
- ✓ Mit einer Schaftlänge von 8,0 cm und einer Klebefläche von 4,5 cm entspricht das CARE CON comfort den Anforderungen vieler Urinalkondomträger.



HMN: 15.25.04.7049

Durchmesser	Schaft / Klebefläche	Artikelnummer	PZN
25 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/25/GHC	17520554
28 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/28/GHC	17520583
30 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/30/GHC	17520620
32 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/32/GHC	17520637
36 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/36/GHC	17520643
41 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/41/GHC	17520666

Verpackungseinheit: 30 Stück

Verpackung: unsteril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE CON special | Typ II

Urinalkondome aus 100% Silikon

selbstklebend

Produktspezifikationen:

- ✓ Die CARE CON special überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einem sicheren Halt, trotz der kurzen Schaftlänge.
 - ✓ Die Dicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt - und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
 - ✓ Der stabile Ansatz verhindert ein Abknicken des Urinalkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
 - ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
 - ✓ Mit einer Schaftlänge von 5,0 cm und einer Klebefläche von 4,0 cm entspricht das special-Modell den speziellen Anforderungen der Anwender mit zurückgezogenem, retrahiertem Penis.
 - ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.



HMN: 15.25.04.7047

Durchmesser	Schaft / Klebefläche	Artikelnummer	PZN
25 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/25/GHC	17520672
28 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/28/GHC	17520689
30 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/30/GHC	17520703
32 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/32/GHC	17520726
36 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/36/GHC	17520732
41 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/41/GHC	17520749

Verpackungseinheit: 30 Stück

Verpackung: unsteril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE CON active | Typ III

Urinalkondome aus 100% Silikon

selbstklebend

Produktspezifikationen:

- ✓ Die CARE CON active überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einem sicheren Halt mit extra-langer Klebefläche.
- ✓ Die Dicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt - und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
- ✓ Der stabile Ansatz verhindert ein Abknicken des Urinalkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
- ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
- ✓ Mit einer Schaftlänge von 8,0 cm und einer Klebefläche von 7,0 cm entspricht das active-Modell den speziellen Anforderungen der sportlichen und aktiven Anwender.
- ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.



HMN: 15.25.04.7048

Durchmesser	Schaft / Klebefläche	Artikelnummer	PZN
25 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/25/GHC	17520755
28 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/28/GHC	17520761
30 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/30/GHC	17520784
32 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/32/GHC	17520790
36 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/36/GHC	17520809
41 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/41/GHC	17520815

Verpackungseinheit: 30 Stück

Verpackung: unsteril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UB 4000TUR Geschlossenes TUR Spülbeutelsystem Mit Pumpball zur kontrollierten postoperativen Blasenspülung Füllvolumen: 4000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Der Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht eine sichere und korrekte Befestigung an den unterschiedlichsten Bettholmen.
- ✓ Die Bakterien- und flüssigkeitsdichten Belüftungsfiter sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.
- ✓ Durch das kontrollierte Spülen der Blase mit dem am Zuleitungsschlauchsystem integrierten Pumpball, kann das postoperativ mögliche Austamponieren der Blase vermieden werden.
- ✓ Eine auf dem Beutel aufgebrachte Rückstecklasche garantiert eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
4000 ml	120 cm	04/02/4000/TUR/GHC	06189004

HMN: 15.25.09.0008

44



Pumpball

Unter Einsatz vom Pumpball und der beiden Schlauchklemmen, ist es in einem speziellen Zusammenspiel dieser Komponenten möglich, die Blase wie auch das Schlauchsystem von Blutkoageln bzw. Prostataspänen frei zuspülen.



Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn im Doghouse

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW UB 4000

Geschlossenes Urindrainagesystem

Füllvolumen: 4000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Der Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht eine sichere und korrekte Befestigung an den unterschiedlichsten Bettholmen.
- ✓ Die Bakterien- und flüssigkeitsdichten BelüftungsfILTER sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.
- ✓ Eine übersichtliche Skalierung sorgt für eine sichere Volumenkontrolle.
- ✓ Eine auf dem Beutel aufgebrachte Rückstecklasche garantiert eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
4000 ml	120 cm	04/02/4000/120/GHC	06718939

HMN: 15.25.09.0009

45



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn im Doghouse

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 20 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW UB 2000

Geschlossene Urindrainagesysteme

Füllvolumen: 2000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Bakterien- und flüssigkeitsdichte BelüftungsfILTER sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage in den Systemen erzielt.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns im Doghouse.
- ✓ Eingearbeiteter T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
2000 ml	120 cm	04/02/2000/120/GHC	06718922
2000 ml	90 cm	04/02/2000/90/GHC	09151597

Verpackungseinheit: 20 Stück

Verpackung: steril

HMN: 15.25.07.0050

46



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn im Doghouse

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 20 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW UB 2000S

Geschlossene Urindrainagesysteme

Füllvolumen: 2000 ml, weicher Schlauch

Produktspezifikationen:

- ✓ Urindrainagesystem mit Tropfkammer verhindert das Aufsteigen von Keimen und somit von Infektionen.
- ✓ Schlauch mit großem Innenlumen aus weichem Material sichert ein sehr gutes Abfließen des Urins und hohen Anwendungskomfort.
- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Bakterien- und flüssigkeitsdichte Belüftungsfilter sorgen für einen permanenten Druckausgleich.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns im Doghouse.
- ✓ Aufgesetzter T-Ablasshahn.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
2000 ml	120 cm	04/02/2000S/120	18728133
2000 ml	90 cm	04/02/2000S/90	18728179

Verpackungseinheit: 50 Stück

Verpackung: steril

HMN: 15.25.07.0003

Der **CARE FLOW BAG** dient als Sichtschutz für die **CARE FLOW UB 2000** als diskrete Aufbewahrung der Bettbeutel.

Produktspezifikationen:

- ✓ Durch praktische Klettverschlüsse ist der Sichtschutz schnell und einfach am Urinbeutel angebracht. Ein weiterer Klettverschluss auf der Vorderseite erlaubt eine saubere und unkomplizierte Entnahme des Ablasshahns sowie dessen Rückführung.
- ✓ Der Sichtschutz besteht aus 100% Polypropylen (PP) und ist somit u.a. beständig gegen organische Säuren.
- ✓ Der Sichtschutz ist hellgrau, bei 30° waschbar und so zur Wiederverwendung geeignet.



Artikelnummer	PZN
04/99/01/945/GHC	09764331

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: nicht steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW UB 2000A Bettbeutel

Steriler Bettbeutel mit integriertem Zwillingshalter

Füllvolumen: 2000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem System. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Ein Rücksteckschlitz garantiert die sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
2000 ml	110 cm	04/04/2000/110/GHC	08871289

HMN: 15.25.06.3037

48



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



BelüftungsfILTER

Ein bakterien- und flüssigkeitsdichter BelüftungsfILTER sorgt für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.



Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 50 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW UB 2000E, UB 2000US

Sterile/ Unsterile Einmalbettbeutel mit Halterung

Füllvolumen: 2000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Das System ist mit einem universellen Stufenkonus ausgestattet und kann dadurch an alle gängigen Katheter angeschlossen werden.
- ✓ Die Produkte sind für den täglichen Wechsel ausgelegt.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Systemen. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.
- ✓ Für die Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen benutzen Sie den unten abgebildeten Zwillingshalter.
- ✓ Der Urinbeutel wird durch das T- Ablassventil sicher entleert.



Produkt	Volumen	Sterilität	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	HMN
UB 2000E	2000 ml	Steril	90 cm	04/04/2000/90/GHC	16047274	15.25.06.3025
UB 2000US	2000 ml	Unsteril	90 cm	04/06/2000/90/GHC	12418549	15.25.06.1047
UB 2000US	2000 ml	Unsteril	130 cm	04/06/2000/130/GHC	08845487	15.25.06.1047

49

UB 2000E: **Verpackungseinheit:** 100 Stück, **Verpackung:** steril
 UB 2000US: **Verpackungseinheit:** 100 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück

Halterung für UB 2000E und UB 2000US

- ✓ Bettbeutelhalterung aus Kunststoff mit Zwillingshalter. Ausgestattet mit zwei Dornen zur Aufnahme der Einmalbettbeutel an ihren vorgestanzten Ösen.



Artikelnummer	PZN
04/99/BHL/PVC/GHC	06718951

Verpackungseinheit: 100 Stück **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
Verpackung: nicht steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo

Unsterile Einmalbettbeutel/Sekretbeutel ohne Ablassventil

Füllvolumen: 2000 ml, 1500 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Beutel sind mit einem universellen Stufenkonnektor ausgestattet, so dass die Beutel an alle gängigen Katheter angeschlossen werden können.
- ✓ Die Produkte sind zum Einmalgebrauch ausgelegt.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Beuteln, so dass der Gefahr aufsteigender Infektionen wirksam vorgebeugt wird (außer beim SB 1500USo).
- ✓ Für die Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen benutzen Sie den unten abgebildeten Zwillingshalter.



Produkt	Volumen	Schlauchlänge	Refluxventil	Artikelnummer	PZN	HMN
UB 2000USo	2000 ml	90 cm	ja	04/07/2000/90/GHC	08845501	15.25.06.0024
UB 1500USo	1500 ml	90 cm	ja	04/07/1500/90/01	16839791	15.25.06.0034
SB 1500USo	1500 ml	90 cm	nein	04/07/1500/90/00	16839785	-

50

UB 2000USo:	Verpackungseinheit: 150 Stück, Verpackung: nicht steril	Unterverpackung: jeweils 10 Stück
UB 1500USo:	Verpackungseinheit: 200 Stück, Verpackung: nicht steril	Unterverpackung: jeweils 10 Stück
SB 1500USo:	Verpackungseinheit: 200 Stück, Verpackung: nicht steril	Unterverpackung: jeweils 10 Stück

Halterung für UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo

- ✓ Bettbeutelhalterung aus Kunststoff mit Zwillingshalter. Ausgestattet mit zwei Dornen zur Aufnahme der Einmalbettbeutel an ihren vorgestanzten Ösen.



Artikelnummer	PZN
04/99/BHL/PVC/GHC	06718951

Verpackungseinheit: 100 Stück **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
Verpackung: nicht steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW UB 1000 Urindrainagesysteme

Beinbeutelsysteme für den Tag & die Nacht

Füllvolumen: 1000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Geschlossenes Urindrainagesystem.
- ✓ Die bakterien- und flüssigkeitsdichten Belüftungsfiter sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage in den Systemen erzielt.
- ✓ Eine Rückstecklasche garantiert eine sichere und hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Urinentnahmestelle.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	HMN
1000 ml	30 cm	04/03/1000/30/GHC	06718885	15.25.07.1012
1000 ml	60 cm	04/03/1000/60/GHC	06718891	15.25.07.1013
1000 ml	90 cm	04/03/1000/90/GHC	06718916	15.25.07.1014



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 30 Stück

Verpackung: steril

Halterungen für Beinbeutel Seite 55-60.

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW UB 750 + 750US sterile/unsterile

Beinbeutelsysteme für den mobilen Anwender

Füllvolumen: 750 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Beinbeutel mit 10 cm und 30 cm Schlauchlänge werden komfortabel am Oberschenkel fixiert.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Systemen. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	10 cm	04/01/750/10/GHC	06718862	steril
750 ml	30 cm	04/01/750/30/GHC	09772046	steril
750 ml	50 cm	04/01/750/50/GHC	06718879	steril

Verpackungseinheit: 10 cm: 75 Stück 30 cm: 60 Stück, 50 cm: 50 Stück

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	10 cm	04/01/750US/10/GHC	01972716	unsteril
750 ml	30 cm	04/01/750US/30/GHC	12341427	unsteril
750 ml	50 cm	04/01/750US/50/GHC	00226543	unsteril

Verpackungseinheit: 10 cm: 120 Stück 30 cm: 100 Stück, 50 cm: 100 Stück, Unterverpackung: jeweils 10 Stück



HMN: 15.25.05.3071
(Art.-Nr. 04/01/750)

HMN: 15.25.05.1096
(Art.-Nr. 04/01/750US)

52



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Doghouse

Eine auf dem Beutel aufgebrachte belüftete Rücksteckklase gewährleistet eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackung: steril / unsteril

Halterungen für Beinbeutel Seite 55-60.

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW UB 750 F + UB 750UF sterile/unsterile

Beinbeutelsystem für den mobilen Anwender

Füllvolumen: 750 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Besonders Anwender mit einer eingeschränkten Handmotorik oder mit reduzierter Kraft können sicher und hygienisch den Beinbeutel mittels unseres neu entwickelten **Kippventils** entleeren.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem Beuteln. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	50 cm	04/01/750F/50/GHC	12371500	steril

Verpackungseinheit: 50 cm: 50 Stück

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	50 cm	04/01/750UF/50/GHC	12371517	unsteril

Verpackungseinheit: 50 cm: 100 Stück

Unterverpackung: jeweils 10 Stück

HMN: 15.25.05.3071
(Art.-Nr. 04/01/750F)

HMN: 15.25.05.1096
(Art.-Nr. 04/01/750UF)

53



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Doghouse

Eine auf dem Beutel aufgebrachte belüftete Rücksteckklase gewährleistet eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Ablasshahn

Das ergonomisch geformte, flache **Kippventil** vom Ablaufschlauch lässt sich einfach und intuitiv bedienen. Um den Beinbeutel zu entleeren kippen Sie das Ablassventil um 180° nach unten.

Verpackung: steril / unsteril

Halterungen für Beinbeutel Seite 55-60.

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW UB 500 + UB 500US sterile/unsterile

3-Kammer-Beinbeutelsysteme für den mobilen Anwender

Füllvolumen: 500 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Beinbeutel mit 10 cm und 30 cm Schlauchlänge werden komfortabel am Oberschenkel fixiert.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem Beuteln. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



HMN: 15.25.05.3094
(Art.-Nr. 04/01/500)

HMN: 15.25.05.1118
(Art.-Nr. 04/01/500US)

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
500 ml	10 cm	04/01/500/10/GHC	09084990	steril
500 ml	30 cm	04/01/500/30/GHC	12341203	steril
500 ml	50 cm	04/01/500/50/GHC	09085009	steril

Verpackungseinheit: 10 cm: 75 Stück, 30 cm: 60 Stück, 50 cm: 50 Stück

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
500 ml	10 cm	04/01/500US/10/GHC	09085015	unsteril
500 ml	30 cm	04/01/500US/30/GHC	12341410	unsteril
500 ml	50 cm	04/01/500US/50/GHC	09085021	unsteril

Verpackungseinheit: 10 cm: 120 Stück, 30 cm: 100 Stück, 50 cm: 100 Stück, Unterverpackung: jeweils 10 Stück

54



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Drei Kammern

Aufgrund der drei Kammern, verteilt sich der Urin im System gleichmäßiger. So lässt sich der Beinbeutel auch im gefüllten Zustand noch diskreter unter der Kleidung tragen.



Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackung: steril / unsteril

Halterungen für Beinbeutel Seite 55-60.

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FIX

Kletthalteband Universal

individuell kürzbar

Produktspezifikationen:

- ✓ Kletthalteband mit zwei aufgenähten Klettschlaufen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.
- ✓ Das elastische Material vermeidet bestmöglich eine Störung der Blutzirkulation am Ober- bzw. Unterschenkel.
- ✓ 70 cm langes Klettband individuell kürzbar zum Tragen am Ober- als auch am Unterschenkel.
- ✓ Es eignet sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutel-systeme: UB 1000, UB 750, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



55

 60°

 Nicht in den Trockner geben

 Nicht bügeln



Länge	Artikelnummer	PZN
70 cm	05/01/BKL/Uni/GHC	06718968

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: unsteril

HMN: 15.99.99.0008

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FIX

Kletthaltebänder Premium-Set

individuell kürzbar

Produktspezifikationen:

- ✓ Sets bestehend aus:
einem extra breiten Kletthalteband mit zwei aufgenähten Klettschlaufen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.
- ✓ Beide Sets haben eine aufgenähte Lasche zur Fixierung des Beinbeutel Schlauches.
- ✓ Das zweite schmale Klettband gewährleistet einen sicheren Halt am unteren Teil der Beinbeutel.
- ✓ Rückseitig aufgebrachte Silikonstreifen für besonders guten Halt am Bein.
- ✓ Das elastische Material vermeidet bestmöglich eine Störung der Blutzirkulation am Ober- bzw. Unterschenkel.
- ✓ 70 cm langes Klettband individuell kürzbar zum Tragen am Ober- als auch am Unterschenkel.
- ✓ Fingerlasche zum einfachen Öffnen des Klettbandes.



Länge	Artikelnummer	PZN
70 cm	05/01/BKL/PRE/SET	09241099

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: unsteril

HMN: 15.99.99.0008

56

- ✓ Die Care Fix Premium-Sets eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelssysteme: UB 1000, UB 750, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.
- ✓ Das Premium-Set mit Knöpfen (Art.-Nr. 05/01/BKL/PRE/03) mit zusätzlich vier aufgenähten Knöpfen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.

60°

Nicht in den Trockner geben

Nicht bügeln

Länge	Artikelnummer	PZN
70 cm	05/01/BKL/PRE/03	12357931

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: unsteril

HMN: 15.99.99.0008



Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FIX

Fixierstrümpfe mit integrierter Beinbeuteltasche

Produktspezifikationen:

- ✓ Weiche, gerippte Beinbeutelfixierstrümpfe mit integrierter Beinbeuteltasche.
- ✓ Komfortable und sichere Fixierung am Ober- als auch am Unterschenkel.
- ✓ Einfaches Entleeren der Beinbeutel durch komfortable Führung des Ablasshahns.
- ✓ Besonders einfaches Anlegen dank extra breitem Klettverschluss (bei Art.-Nr. 05/02/10).
- ✓ Die CARE FIX Fixierstrümpfe eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelsysteme:
UB 750, UB 750F, UB 750US, UB 750UF,
UB 500 und UB 500US.

Größe	Artikelnummer	PZN
XXL	05/02/10/OS/XXL/GHC	08880957
XL	05/02/10/OS/XL/GHC	08871272
L	05/02/10/OS/L/GHC	08876513
M	05/02/10/OS/M/GHC	08845748
S	05/02/10/US/S/GHC	07126649

Größenumfang: XXL = 60 - 85 cm, XL = 50 - 60 cm,
L = 40 - 60 cm, M = 35 - 45 cm, S = 25 - 40 cm

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: unsteril

 60°

 Nicht in den Trockner geben

 Nicht bügeln

Gemessen wird mittig am Ober- oder Unterschenkel.

Größe	Artikelnummer	PZN
XL	05/02/11/OS/XL/GHC	12418555
L	05/02/11/OS/L/GHC	07126017
M	05/02/11/OS/M/GHC	07126023
S	05/02/11/US/S/GHC	07126313

Größenumfang: XL = 65 - 95 cm, L = 55 - 80 cm,
M = 45 - 65 cm, S = 30 - 45 cm

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: unsteril



HMN: 15.99.99.0009



HMN: 15.99.99.0009

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FIX

Oberschenkelstulpen Größen: XL, L, M

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Oberschenkelstulpe ist aus weichem waschbarem Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeuteltasche.
- ✓ Rückseitig aufgebrachter Silikonstreifen, ermöglicht einen bestmöglichen Halt der Stulpe.
- ✓ Beidseitig tragbar.
- ✓ Aufnahme der Beinbeutel durch die mittels Klettverschluss zu öffnende integrierte Tasche; inklusive Öffnung für Ablasshahn.
- ✓ Die CARE FIX Stulpen eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelsysteme: UB 1000, UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



58

 60°

 Nicht in den Trockner geben

 Nicht bügeln

Gemessen wird mittig am Oberschenkel.

Oberschenkelstulpen

Größe	Artikelnummer	PZN
XL	05/02/12/XL/GHC	09080408
L	05/02/12/L/GHC	09080383
M	05/02/12/M/GHC	09080377

Größenumfang: XL = 61 cm, L = 58 cm, M = 54 cm

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: unsteril



HMN: 15.99.99.0009

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FIX

Unterschenkelstulpen Größen: L, M, S

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Unterschenkelstulpe ist aus weichem waschbaren Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeuteltasche.
- ✓ Rückseitig aufgebrachter Silikonstreifen, ermöglicht einen bestmöglichen Halt der Stulpen.
- ✓ Beidseitig tragbar.
- ✓ Aufnahme der Beinbeutel durch die mittels Klettverschluss zu öffnende integrierte Tasche; inklusive Öffnung für Ablasshahn.
- ✓ Die CARE FIX Stulpen eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelsysteme: UB 1000, UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



 60°

 Nicht in den Trockner geben

 Nicht bügeln

Gemessen wird mittig am Unterschenkel.

Unterschenkelstulpen

Größe	Artikelnummer	PZN
L	05/02/13/L/GHC	09080437
M	05/02/13/M/GHC	09080420
S	05/02/13/S/GHC	09080414

Größenumfang: L = 37 cm, M = 35 cm, S = 32 cm

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: unsteril



59

HMN: 15.99.99.0009

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FIX

Einbeinhosen Premium Größen: XL, L, M

Produktspezifikationen:

- ✓ Premium Einbeinhosen aus weichem Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeuteltasche.
- ✓ Individuell einstellbarer, breiter Hüftgürtel mit rückseitigen Silikonstreifen zur besseren Fixierung.
- ✓ Beidseitig tragbar.
- ✓ Aufnahme der Beinbeutel durch die mittels Klettverschluss zu öffnende integrierte Tasche; inklusive Öffnung für Ablasshahn.
- ✓ Einfaches Entleeren der Beinbeutel durch komfortable Führung des Ablasshahns.
- ✓ Sie eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeutelsysteme: UB 1000, UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



60

60°

Nicht in den Trockner geben

Nicht bügeln

Gemessen wird mittig am Ober- oder Unterschenkel.

Größe	Artikelnummer	PZN
XL	05/03/10/XL/GHC	09080472
L	05/03/10/L/GHC	09080466
M	05/03/10/M/GHC	09080443

Größenumfang: XL = 98 - 120 cm, L = 90 - 100 cm, M = 85 - 95 cm

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: unsteril



HMN: 15.99.99.0009

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE DRESS

Suprapubisches Verbandset

Produktspezifikationen:

- ✓ Suprapubisches Verbandset mit Schlitzkompressen zur optimalen Versorgung der suprapubischen Punktionsstelle.
- ✓ Das beigefügte kleinere Pflaster dient der vorübergehenden Fixierung des suprapubischen Katheters an der Bauchdecke und verhindert so ein Verrutschen des Katheters.



61

Verpackungsinhalt:

- 1 x Stretch Pflaster 10 x 10 cm
- 1 x Stretch Pflaster 5 x 3 cm
- 3 x Vlieskompressen 5 x 5 cm, 6-fach
- 2 x Vliesschlitzkompressen 5 x 5 cm, 6-fach
- Verpackt in 1 Tiefziehpackung -

Artikelnummer	PZN
08/02/VS/GHC	06718974

Verpackungseinheit: 25 Sets

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE DRESS

Abdominales PEG Verbandset

Produktspezifikationen:

- ✓ Abdominales PEG Verbandset zur optimalen Versorgung der PEG-Punktionsstelle.



Verpackungsinhalt:

- 1 x Stretch Pflaster 12 x 15 cm
- 2 x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach
- 2 x Vliesschlitzkompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach
- Verpackt in 1 Tiefziehpackung -

Artikelnummer	PZN
08/02/PEG/GHC	05461059

Verpackungseinheit: 15 Sets

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen



Besuchen Sie unsere Website **www.ghc-medical.de**.

Dort finden Sie detaillierte Informationen über unser Unternehmen sowie dem gesamten Produktportfolio.

Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf:

Mo.-Do.: 08:00 – 17:00 Uhr

Fr.: 08:00 – 14:00 Uhr

Kontakt:

GHC German Health Care GmbH
Birkstück 15
24999 Wees/Flensburg

Tel.: +49 (0) 46 31 57 200-0

Fax: +49 (0) 46 31 57 200-19

info@ghc-medical.de
www.ghc-medical.de



GHC German Health Care GmbH
Birkstück 15
24999 Wees/Flensburg

Tel.: +49 (0) 46 31 57 200-0
Fax: +49 (0) 46 31 57 200-19

info@ghc-medical.de
www.ghc-medical.de